


DHCL

- doppia testa
- lineare
- convex
- phased
- 3 in 1
- color doppler

USB & Wi-Fi 3 in una sonda

puoi connetterla a Windows/Android/iOS
Tablet, Smartphone, PC tramite Wi-Fi o USB

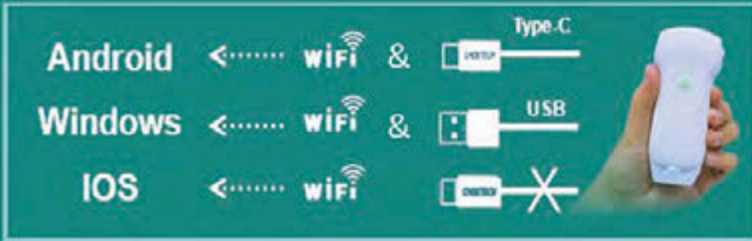

Freq:
7.5/10MHz
Depth:
20-100mm
Footprint:
L25

Linear



125mm
N.W:90g

Convex + Cardiac


Freq:
2.5/5MHz
3.5/5MHz
Depth:
90-160mm
90-305mm
Radius:
R45



Puoi scansionare chiunque in qualsiasi momento e ovunque comodamente, come in una clinica, un reparto ospedaliero, un pronto soccorso o una sala operatoria.
Applicazione: Addome, Ostetricia/Ginecologia, Cardiaco, Rene, Urologia, Tiroide materno, MSK, Vascolare, Pediatria, Carotide

Software scaricabile dal Play Store o Apple Store installabile direttamente dall'utente, per installazione su PC viene effettuata direttamente in desktop remoto dall'azienda Sacem.

Gli aggiornamenti costanti del software migliorano gli esami e la view e sono completamente gratuiti e per tutta la vita.

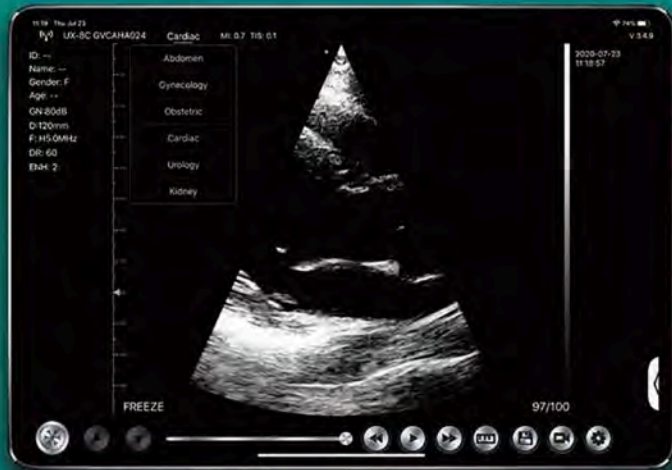

Sonda segnale WiFi integrato

**Modalita: B, B+M,
Color Doppler, PW,
Power Doppler**



**Batteria al Litio
2800mAh Working
time: ≥3h Standby
time: ≥12h**

Supporta il lavoro durante la ricarica

Software di Controllo

✓ Modifica e stampa del rapporto di supporto

✓ English, Italian, Spanish,

GN(gain) , D(depth) ,ENH(enhancement),DR(dynamic range)

F(frequency),FocusPos ,PRF,WF ,Mode,8TGC,Biopsy .Annote,

Page left/right up/down

Misurazione

Length, Area/Circumference, Angle,Trace,DistanceGA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)

EFW(BPD,FL),Heart Rate, Time, Distance,Velocity, Heart Rate(2), S/D, Depth

Clinical images



Thyroid C Mode

Carotid C Mode

Vascular PW Mode



Liver B Mode

Cardiac C Mode

Kidney C Mode



Anybody

Anywhere

Anytime

Sacem srl

Via degli Artigiani 2

Pandino (CR) ITALIA

Tel: +39 0373 61479 e-mail:info@sacemsrl.net